

## RONDOflex plus 360

Različite namjene za  
vrhunske rezultate:

- jednostavno
- čisto
- bezbolno

25%  
OFF

Trajanje promocije: do 31.12.2023.



Tretman površina prilikom cementiranja za  
veću snagu veze

Minimalno invazivne preparacije

Ugodna za pacijente, posebno prikladna za  
osjetljive pacijente, djecu i adolescente.

# Fleksibilan rad. Razne indikacije.

## KaVo RONDOflex plus pjeskara otvara mnoge mogućnosti:

### Poboljšanje veze između površine zuba i nadogradnji pri cementiranju:


- Čišćenje i priprema površine zuba, metala, keramike, kompozita, akrilata
- Priprema za IDS (Immediate Dentin Sealing)
- Poboljšanje veze pri cementiranju bravica, ljuskica

### Preparacije:

- Manje preparacije kod restauracija kompozitom, klase I do VI
- Preparacije manjih kaviteta i fisura, lezija
- Uklanjanje diskoloracija zuba

### Restauracije: intraoralno i ekstraoralno

- Uklanjanje ostataka cementa
- Reparacije: uklanjanje kompozita, akrilata i drugih materijala na bazi smole

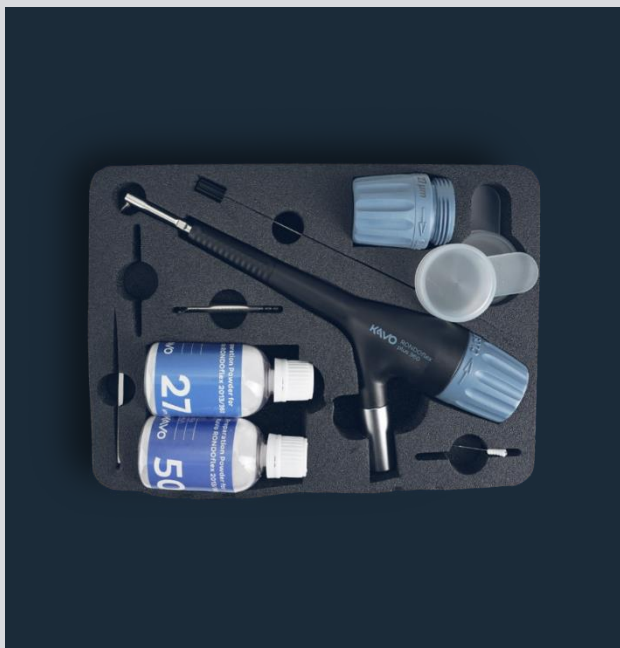

### KaVo RONDOflex plus: čist i jednostavan rad sa vodom

Vodeni mlaz okružuje prah na vrhu kanile. Na taj način voda hvata sve čestice praha. Rezultat je manje kontaminacije i taloženja praha na okolnim zubima, bez gubitka učinkovitosti, uz manju potrošnju praha. I vaši će pacijenti osjetiti razliku: nema suhih usta nakon tretmana radi nataloženog praha.

### Učinkovitost na velikom području i fleksibilno rukovanje

Za veću abrazivnu snagu na velikom području koristite prah veličine čestica od 50  $\mu\text{m}$ , za manju i precizniju abrazivnu snagu, koristite prah s veličinom čestica od 27  $\mu\text{m}$ . Dostupne su četiri različite kanile (različit promjer i nagib). S okretnom čahuricom za držanje od 360° možete lako doprijeti do svih regija u ustima. Jednostavno se spaja na stomatološku jedinicu preko MULTIflex spojke.